

# excILOR®

## TRAITEMENT DES VERRUES 2 en 1

### LA BOITE CONTIENT



1 Dispositif 2en1



1 Sachet de supports en mousse



1 Notice

### ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES



Mouchoirs en papier



Chronomètre

### 2 PRODUITS EN 1 DISPOSITIF

#### Produit 1 : CRYOTHERAPIE

Supports en mousse

Cryoréservoir

UNIQUEMENT LE JOUR 1

#### Produit 2 : GEL ACIDE

Applicateur gel

JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

Enfants : 1x par jour  
Adultes : 2x par jour (1x le matin, 1x le soir)

### LIRE INTÉGRALEMENT LA NOTICE AVANT DE COMMENCER À UTILISER LE PRODUIT

Si vous avez des questions, contactez votre médecin généraliste ou votre pharmacien.



Instructions video

#### CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT D'UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT 2 EN 1 DES VERRUES

- N'utilisez pas Excilor® Traitement 2 en 1 des verrues :**
- sur les verrues autres que celles des mains et des pieds ;
  - sur une peau qui saigne, qui est irritée ou enflammée, avec des démangeaisons ou un gonflement ;
  - sur les acrochordons, les grains de beauté, les taches sombres de la peau, les taches de rousseur, les molluscum contagiosum, une kératose séborrhéique (verruca seborrheica) ou une peau exfoliée ;
  - si vous n'êtes pas certain(e) qu'il s'agisse réellement d'une verrue ;
  - si vous êtes hypersensible à l'un des ingrédients.

#### ⚠ Avertissements et précautions

1. **RÉSERVÉ UNIQUEMENT** aux verrues situées sur les mains ou les pieds.
2. Ne pas avaler ou ne pas inhaler l'agent de congélation. Utiliser le produit uniquement dans des endroits bien aérés.
3. Utiliser le produit uniquement avec les mousses fournies.
4. Ne pas appuyer trop fort lors de l'application de la mousse sur la verrue.
5. Appliquer la mousse pendant **20 secondes maximum** sur une verrue vulgaire et **jusqu'à 40 secondes** sur une verrue plantaire. (Voir la section QU'EST-CE QU'UNE VERRUE ?)
6. Ne pas tapoter la mousse sur la zone autour de la verrue.
7. Les mousses sont à usage unique.
8. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. L'agent de congélation est inflammable et peut causer des engelures sur une peau saine.
9. Ne pas tenir le cryoréservoir près de votre visage, au-dessus des parties de votre corps ou de vos vêtements.
10. Tenir à l'écart des flammes, des sources d'inflammation, des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil et des sources électrostatiques et électriques. Ne pas exposer le dispositif à des températures supérieures à 50 °C.
11. Ne pas fumer et ne pas allumer de cigarettes à proximité du produit.
12. Ne pas percer et ne pas brûler le cryoréservoir, même après l'avoir utilisé.
13. Le gel de traitement contient un acide corrosif.
14. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Si le gel entre accidentellement en contact avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
15. Éviter le contact avec la peau saine autour de la verrue. Vous pouvez utiliser une pommade comme la vaseline pour protéger la zone environnante avant d'appliquer le gel.
16. Si le gel entre accidentellement en contact avec de la peau saine, **laver immédiatement la zone avec beaucoup de savon et d'eau pour éviter la sensation d'irritation ou de brûlure.**
17. Si vous avez des difficultés à appliquer le gel avec précision, par exemple sur la plante du pied, demandez que l'on vous aide.
18. Éviter tout contact du gel avec les vêtements, les bijoux, les tissus ou les meubles, car il pourrait les endommager.
19. Se laver les mains (à l'exception de la zone traitée) immédiatement après utilisation du produit. Si vous avez traité une verrue sur les mains, attendez 5 minutes.

20. Après utilisation du produit, il peut rester un peu de gel de traitement dans le dispositif. Vous devez donc faire attention lors de la fermeture et de la réouverture du dispositif.

21. Ne pas exposer la zone traitée à la lumière du soleil tant que la peau n'est pas revenue à son état normal. Cela peut prendre entre 4 et 6 semaines. Une hyperpigmentation ou une hypopigmentation de la peau peut se produire à cause de l'exposition au soleil.
22. Ne pas toucher et ne pas piquer la peau traitée en raison de la contagiosité de la verrue. Ne pas décoller la croûte car elle doit tomber d'elle-même.
23. Pour une bonne hygiène, le traitement ne doit être utilisé que par un seul utilisateur.
24. Consultez votre médecin généraliste si :
  - la sensation de picotement persiste ;
  - la verrue n'a pas disparu après 3 cycles de traitement ;
  - une irritation, une rougeur ou une douleur apparaissent.

#### À QUOI DEVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ?

Pendant le traitement, une couche de corne (couche de peau durcie) se formera sur la zone de la verrue traitée. Cette callosité diminuera progressivement. Une ampoule, qui peut ne pas être visible à l'œil nu, pourrait apparaître sous la verrue. Pendant ce processus, la peau épaisse de la verrue et le virus à l'origine de la verrue vont disparaître ou tomber.

Pour vérifier si la verrue a été éliminée : trempez la zone traitée dans de l'eau tiède pendant 5 minutes et frotter délicatement la callosité avec une lime. Si la peau ne présente pas de petits points noirs (petits vaisseaux sanguins, typiques d'une verrue), la verrue a été éliminée.

La callosité n'est pas une verrue. Quelques semaines peuvent être nécessaires pour que la callosité diminue avant de voir le résultat optimal. La peau renouvelée aura un aspect plus lisse et légèrement rose. Elle retrouvera sa couleur naturelle au cours des semaines suivantes.

#### QU'EST-CE QU'UNE VERRUE ?

Les verrues vulgaires (verruca vulgaris) et les verrues plantaires (verruca plantaris) apparaissent sur la peau sous la forme de petites excroissances rugueuses ressemblant à des choux-fleurs, qui sont causées par l'infection du virus du papillomavirus humains (VPH). Les verrues vulgaires apparaissent principalement sur les mains, les doigts ou les orteils. Les verrues plantaires se développent principalement sur la plante des pieds ou sur les talons. Elles ont tendance à être plus plates et plus dures. Elles sont souvent douloureuses lorsque vous marchez ou que vous êtes debout. Les deux formes sont très contagieuses et touchent trois personnes sur quatre au cours de leur vie.

#### COMMENT EXCILOR® TRAITEMENT 2 en 1 DES VERRUES FONCTIONNE-T-IL ?

Excilor® Traitement 2 en 1 des verrues est un dispositif médical pour traiter efficacement et rapidement les verrues vulgaires et les verrues plantaires soi-même à domicile en toute sécurité. Excilor® Traitement 2 en 1 des verrues contient un produit avec un agent de congélation et un produit avec de l'acide sous forme de gel, basé sur l'ingrédient actif médical TCA-Active™, combinant ainsi la cryothérapie et le traitement par de l'acide en un seul dispositif. En ciblant la verrue, à la fois en gelant rapidement le cœur de la verrue et en exfoliant la peau infectée, vous combinez les deux traitements anti-verrues les plus couramment utilisés pour obtenir des résultats plus rapides. La peau épaissie de la verrue et le virus à l'origine de la verrue sont éliminés et une peau nouvelle et saine apparaît.

#### COMBINAISON AVEC D'AUTRES TRAITEMENTS ET/OU MÉDICAMENTS

Ne pas utiliser avec d'autres traitements contre les verrues. Il n'existe aucune interaction connue avec

des médicaments, s'ils sont utilisés conformément à leur notice.

#### QUI PEUT UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT 2 en 1 DES VERRUES ?

Excilor® Traitement 2 en 1 des verrues peut être utilisé par les adultes et les enfants dès l'âge de 4 ans. Les adultes doivent appliquer le traitement aux enfants.

Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, que vous êtes diabétique ou que vous avez une mauvaise circulation sanguine ou des maladies de la peau, nous vous recommandons de consulter votre médecin généraliste avant d'utiliser le produit.

#### QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ?

En cas d'utilisation sur une peau saine, une sensation de brûlure ou de douleur dans la zone traitée peut apparaître, et provoquer des lésions cutanées. Si la sensation de brûlure ou de douleur persiste jusqu'à l'application suivante, le traitement doit être arrêté.

- Les complications sont rares. Il est extrêmement rare qu'une marque ou une cicatrice permanente apparaisse. Cela pourrait être principalement lié à une anomalie, comme les problèmes de cicatrisation ou une infection. Si c'est votre cas, veuillez consulter votre médecin généraliste.
- Comme avec toutes les méthodes cryothérapeutiques, la peau peut blanchir temporairement.
- L'application de l'agent de congélation peut causer une sensation de brûlure, de démangeaison ou de douleur pendant et après la congélation, qui diminue rapidement après le dégel de la zone.
- Une surexposition au produit de congélation pourrait endommager les couches supérieures de la peau et causer des cicatrices et/ou endommager les nerfs

#### QUELS SONT LES INGRÉDIENTS ?

Cryo-Active™ Agent de congélation.  
TCA-Active™ (à base d'acide trichloroacétique), Carbopol, Eau.

#### COMMENT CONSERVER LE PRODUIT ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conservé dans l'emballage d'origine, à température ambiante (15-25 °C) et à l'abri des rayons du soleil.

Tenir à l'écart des flammes, des sources d'inflammation, des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil et des sources électrostatiques et électriques. Ne pas exposer le dispositif à des températures supérieures à 50 °C.

Nettoyer soigneusement la pointe de l'applicateur de gel avec un mouchoir en papier après chaque utilisation et refermer le dispositif.

Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le dispositif et sur la boîte extérieure. Après la première ouverture, le produit a une durée de conservation de 6 mois. Ne pas dépasser la date de péremption.

#### QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

- Un dispositif contenant 2 produits :
  - 1 cryoréservoir de 11,5 mL, avec un support de mousse
  - 1 applicateur de gel TCA-Active™ de 1 mL
- 1 sachet de supports avec 5 mousses d'application
- 1 notice

#### COMMENT UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT 2 EN 1 DES VERRUES ?

Voir le verso de la notice ➡

## COMMENT UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT 2 en1 DES VERRUES ?

**Jour 1:** appliquez la cryothérapie ❄️. Adultes et enfants : **une seule fois**.

**Jour 2, 3, 4, 5:** appliquez le traitement d'acide sous forme de gel 💧. Adultes : 2 fois par jour ; Enfants de 4 à 12 ans : 1 fois par jour.

Si vous utilisez le produit pour la première fois, **traitez une seule verrue** avant de traiter les autres verrues, afin de tester l'effet du produit sur votre peau. Commencez à traiter une autre verrue seulement si vous n'avez pas eu d'effets secondaires (normalement dans les 5 jours qui suivent la première application). S'il y a plusieurs verrues rapprochées (distances de moins de 1 cm), attendez que la peau retrouve son état normal avant de traiter une autre verrue (cela peut prendre jusqu'à 6 semaines).

Si la verrue ne disparaît pas complètement, **le traitement peut être répété jusqu'à 3 fois**. Répétez le traitement après une période de repos de **4 jours minimum à 1 semaine maximum**. Voir À QUOI DEVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ? pour vous aider à déterminer si votre verrue a été complètement éliminée ou non.

Remarque : lorsque vous traitez une verrue recouverte par de la corne, nous vous conseillons de faire tremper le pied dans de l'eau tiède pendant 5 minutes et de frotter délicatement la callosité avec une lime avant le traitement.

### Jour 1 - CRYO | Produit 1


#### PRÉPAREZ-VOUS POUR LE TRAITEMENT :





1. Lisez intégralement les instructions ou regardez la vidéo. Enlevez l'autocollant de sécurité.



Instructions video

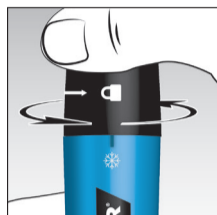

2. Ouvrez le produit 1. Tournez à partir de 🔒 → 🔓.

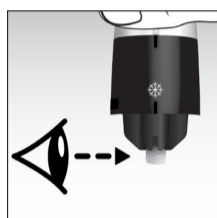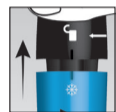

3. Vérifiez la mousse à l'intérieur.


**REMARQUE :** si vous utilisez le produit pour la deuxième fois, placez une nouvelle mousse dans le support de mousse noir. La mousse est à utilisation unique.

#### APPLIQUEZ LE TRAITEMENT :


**REMARQUE :** lire les étapes 4 à 8 avant de continuer ! Utilisez un chronomètre.



4. Posez le produit sur la table de manière stable pendant toute la procédure.

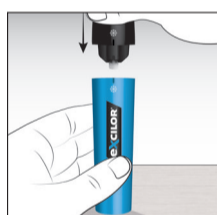

5. Alignez les symboles ❄️. Ne tournez pas et n'appuyez pas.

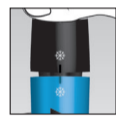

6. **APPUYEZ FERMEMENT pendant 1 seconde.** Puis soulevez le support de mousse noire hors du cryoréservoir bleu.

**REMARQUE :** s'il est chargé trop longtemps, un liquide froid et inoffensif s'échappera du dispositif. C'est très froid, mais pas dangereux. Lavez immédiatement en cas de contact avec de la peau saine.



7. **ATTENDEZ 20 secondes** pour que la température optimale soit atteinte, du givre et de la condensation inoffensive apparaîtront.




8. **APPUYEZ LÉGÈREMENT pendant 20 secondes** sur la verrue.

**REMARQUE :** sur les peaux plus épaisses ou calleuses appliquez pendant **40 secondes** sur les verrues plantaires.



#### APRÈS LE TRAITEMENT :

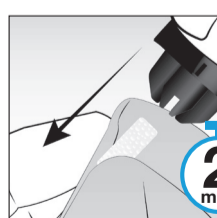

9. Attendez **2 minutes** avant d'utiliser un mouchoir en papier pour retirer la mousse et la jeter.

**REMARQUE :** pour traiter une autre verrue, répétez à partir de l'étape 3.




10. Refermez le produit 1.

Tournez 🔒 → 🔓 jusqu'à ce que vous entendiez un clic. **N'appuyez pas vers le bas.**




### Jour 2, 3, 4, 5 - GEL ACIDE | Produit 2

#### PRÉPAREZ-VOUS POUR LE TRAITEMENT :

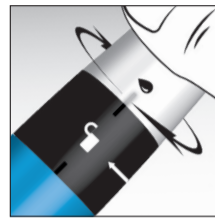

1. Ouvrez le produit 2. Alignez 💧 et 🔒 tirez pour ouvrir.

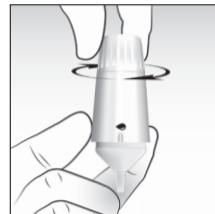


2. - Tenez verticalement.
  - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Cliquez rapidement afin de disperser le gel dans la pointe.
  - Essayez la pointe et ne cliquez qu'une seule fois pour une dose précise.

**REMARQUE:** Pour la première utilisation: plusieurs tours complets (jusqu'à 8) peuvent être nécessaires afin d'obtenir une pression suffisante pour briser le joint hermétique et libérer le gel dans la pointe.

#### APPLIQUEZ LE TRAITEMENT :


**REMARQUE:** lire les étapes 3 à 8 avant de continuer ! Utilisez un chronomètre.

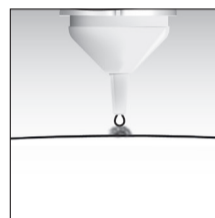

3. Appliquez **une goutte (un clic) exclusivement** sur la verrue. Si une seule goutte ne permet pas de couvrir toute la verrue, appliquez une autre goutte de gel.




**Si le gel corrosif entre accidentellement en contact avec de la peau saine, lavez immédiatement la zone avec beaucoup de savon et d'eau pour éviter d'irriter ou de brûler.**

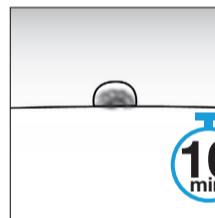


4. Attendez **entre 10 et 15 minutes** avant de mettre des chaussettes, des chaussures ou des gants.



#### APRÈS LE TRAITEMENT :

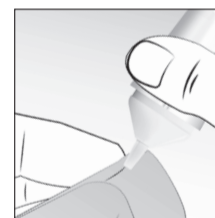

5. Nettoyez la pointe avec un mouchoir en papier.

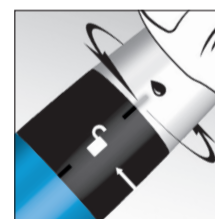

6. Refermez le produit 2. Tournez à partir de 🔒 → 🔓.



7. Évitez la lumière du soleil pendant 4 à 6 semaines.



8. Répétez le traitement **2 fois par jour** pendant **4 jours**.

**REMARQUE:** pour les enfants de 4 à 12 ans : appliquez le gel seulement **1 fois par jour**.

**FABRICANT**  
Medical Brands  
Innovations B.V.,  
Piet Heinkade 199,  
1019 HC Amsterdam,  
Pays-Bas.

La dernière révision du mode  
d'emploi date de décembre 2017

100CAVE.FRI.00

**DISTRIBUTEUR**  
Vemedica Consumer Health France  
114 rue Gallieni  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
Contact : Vemedica France 01 41 10 81 91  
Plus d'informations : [www.excilor.com](http://www.excilor.com)

CE 0086