

EXCILOR®

TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 en 1

INTERIOR DEL ESTUCHE



Dispositivo



Soporte de espuma



Instrucciones de uso

QUÉ NECESITA



Pañuelos



Temporizador

2 PRODUCTOS EN 1 DISPOSITIVO

Producto 1: CRIO

Soporte de espuma

Contenedor de Crioterapia

Solo día
1

Producto 2: APLICADOR DE GEL

Aplicador de gel

Día **2** Día **3** Día **4** Día **5**

Niños: 1 vez al día

Adultos: 2 veces al día

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL PRODUCTO

Ante cualquier duda consulte con su médico o farmacéutico



Instrucciones en video

QUÉ NECESITA SABER ANTES DE UTILIZAR EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1

No utilizar Excilor® Tratamiento Antiverrugas 2 en 1:

- Si la verruga está localizada en una zona que no sea en los pies o manos;
- En una piel sangrante, irritada o inflamada que muestre cualquier signo de inflamación, como picor o hinchazón;
- En papilomas, lunares, manchas oscuras, pecas, verrugas de agua (mollusca contagiosa), queratosis seborreica (verruca seborreica) o piel exfoliada;
- Si duda de que sea una verruga;
- Si tiene hipersensibilidad a alguno de los ingredientes.

PRECAUCIONES DE USO

1. Exclusivamente para verrugas situadas en las manos o en los pies.
2. No ingerir o inhalar el agente congelante, utilizar solamente en zonas bien ventiladas.
3. Utilizar solamente en combinación con la espuma que acompaña el producto.
4. No ejercer demasiada presión cuando se aplica la espuma en la verruga.
5. En una verruga normal, aplicar la espuma durante 20 segundos como máximo. En una verruga plantar aplicar durante un máximo de 40 segundos. (Leer el apartado «Qué son las verrugas»).
6. No ponga la espuma en el área alrededor de la verruga.
7. Las espumas son para un solo uso.
8. El agente congelador es inflamable y puede causar congelación en la piel sana.
9. No sostenga el contenedor de Crio cerca de la cara, ni sobre partes de su cuerpo o tela.
10. Mantener alejado del fuego abierto, fuentes de ignición, fuentes de calor, luz solar directa y fuentes electrostáticas y eléctricas. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 50°C.
11. No fume ni tenga cigarrillos encendidos cerca.
12. No perforar ni quemar el contenedor de Crio, incluso después de su uso.
13. El gel de tratamiento contiene un ácido corrosivo.
14. Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. En caso de que el gel entre en contacto accidental con los ojos o las mucosas, enjuague con abundante agua y busque asistencia médica.
15. Evite el contacto con la piel sana que rodea la verruga. Usted puede usar una pomada como vaselina para proteger la zona circundante antes de aplicar el gel.
16. Si el gel entra en contacto con la piel sana, **limpie la zona inmediatamente con abundante jabón y agua para prevenir la irritación o quemazón de la piel sana.**
17. Si tiene dificultades para aplicar el gel con precisión, por ejemplo en la planta del pie, pida ayuda.
18. Evitar el contacto del gel con la ropa, joyas, telas o muebles ya que puede dañarlos.
19. Lávese las manos (excepto en la zona tratada) inmediatamente después del uso. Si ha tratado una verruga en las manos, espere 5 minutos.
20. Después de su uso, puede haber pequeños residuos de gel de tratamiento en el dispositivo, por lo tanto, precaución al cerrar y volver a abrir el dispositivo.
21. No exponga la zona tratada a la luz solar hasta que la piel haya vuelto a la normalidad. Puede tardar de 4 a 6 semanas. La hiperpigmentación o hipopigmentación de la piel puede ocurrir debido a la exposición a la luz solar.

22. No toque ni frote la piel tratada, porque una verruga es contagiosa. No desprenda la costra, ya que debe caerse sola.

23. Para mantener la higiene personal, el tratamiento debe ser utilizado por un solo usuario.

24. Consulte con su médico si:

- persiste la sensación de picazón;
- la verruga no ha desaparecido después de 3 ciclos de tratamiento;
- nota irritación, enrojecimiento o dolor.

¿QUÉ RESULTADOS ESPERAR?

Durante el tratamiento, se formará un callo (capa endurecida de la piel) en el sitio del tratamiento de la verruga. Este callo se irá desgastando gradualmente. Una ampolla, que puede no ser visible a simple vista, podría aparecer debajo de la verruga. A medida que esto ocurre, la piel engrosada de la verruga y su virus causante desaparecerá o se caerá.

Para verificar si la verruga ha desaparecido, puede mojar el área tratada con agua tibia durante 5 minutos y frotar el callo cuidadosamente con una lima. Si la piel no muestra pequeños puntos negros (pequeños vasos sanguíneos, típicos de una verruga), significa que la verruga ha desaparecido.

El callo no es una verruga. Puede haber un callo durante un par de semanas antes de obtener el resultado óptimo. La piel renovada se verá más lisa, ligeramente rosada y recobrará en las semanas posteriores su color natural en la piel.

¿QUÉ ES UNA VERRUGA?

Las verrugas comunes (verruca vulgaris) y las verrugas del pie (verruca plantaris) aparecen en la piel como pequeños tumores similares a los de la coliflor, causados por la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Las verrugas comunes se presentan principalmente en las manos, los dedos de las manos o los pies. Las verrugas del pie crecen principalmente en las plantas de los pies o los talones y tienden a ser más planas, más duras y a menudo sensibles/dolorosas cuando se camina o se está de pie. Ambas son altamente contagiosas y afectan a tres de cada cuatro personas durante su vida.

¿CÓMO FUNCIONA EXCILOR® ANTIVERRUGAS 2 EN 1?

Excilor® Antiverrugas 2 en 1 es un producto sanitario para el tratamiento eficaz y rápido de las verrugas comunes y las verrugas de los pies. Excilor® tratamiento Antiverrugas 2 en 1 contiene un producto con un agente de congelación, y un producto con un gel, basado en el principio activo activo TCA-Active, que combina la Crio y el tratamiento con gel en un solo dispositivo. Al apuntar a la verruga tanto congelando rápidamente el núcleo de la verruga como exfoliando la piel infectada, se combinan los dos tratamientos de verrugas más utilizados para obtener resultados más rápidos. Tanto la piel engrosada de la verruga como su virus causante son eliminados y aparecerá nueva piel sana.

COMBINACIÓN CON OTROS TRATAMIENTOS Y/O MEDICAMENTOS

No usar con otros tratamientos antiverrugas. No se conocen interacciones con medicamentos, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1?

EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1 puede ser utilizado por adultos y niños a partir de los 4 años de edad. Los adultos deben aplicar el tratamiento a los niños. Durante el embarazo o la lactancia o en caso de ser diabético, tener mala circulación sanguínea o enfermedades de la piel, se recomienda consultar con su médico antes de usar el producto.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

Cuando se usa sobre la piel sana, puede aparecer picor, ardor leve o sensación dolorosa en la zona tratada, lo que puede causar daño a la piel. En caso de que la sensación de picor, ardor o dolor persista hasta la siguiente aplicación, se debe interrumpir el tratamiento.

- Las complicaciones son poco frecuentes. Es extremadamente raro que se produzca una marca o cicatriz permanente. Esto podría estar relacionado principalmente con una anomalía como los trastornos de cicatrización o una infección. En caso afirmativo, consulte con su médico.
- Como en todos los métodos de congelación, la piel puede volverse blanca temporalmente.
- La aplicación del agente de congelación puede causar picor, picazón, sensación de dolor durante y después de la congelación que disminuye rápidamente después de la descongelación del área.
- La sobreexposición al producto congelante podría causar daño a las capas superiores de la piel, produciendo cicatrices y/o dañar al nervio.

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES?

Cryo-Active™, TCA-Active™ (basado en ácido tricloroacético), Carbopol, Aqua.

CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en el envase original a temperatura ambiente (15-25 °C) y proteger de la luz solar.

Mantener alejado del fuego abierto, fuentes de ignición, fuentes de calor, luz solar directa y fuentes electrostáticas y eléctricas. No exponer el dispositivo a temperaturas superiores a 50 °C.

Limpiar cuidadosamente la punta del aplicador de gel con un pañuelo de papel después de cada uso y bloquear el dispositivo.

No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el dispositivo y en la caja exterior. Después de la primera apertura, el producto tiene una vida útil de 6 meses, no exceder la fecha de caducidad.

CONTENIDO DEL ESTUCHE

- Un dispositivo que contiene 2 productos:
 - un depósito criogénico de 11,5 ml con soporte de espuma y espuma
 - un aplicador de gel TCA-Active™ de 1 ml
- Bolsa con 5 espumas de aplicación
- Instrucciones de uso

¿CÓMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1?

Ver parte posterior de las instrucciones de uso

¿CÓMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1?

Día 1: Aplicar la Crio ❄️. Adultos y niños: **una sola vez.**

Día 2, 3, 4, 5: aplicar el gel de tratamiento 💧. Adultos: 2 veces al día; niños de 4 a 12 años: 1 vez al día.

Cuando se usa por primera vez tratar sólo una verruga antes de tratar las verrugas múltiples, para experimentar el efecto sobre su piel. Comenzar a tratar otra verruga sólo si no se experimenta ningún efecto secundario (normalmente dentro de 5 días). Si hay verrugas múltiples cerca unas de otras (dentro de 1 cm), esperar hasta que la piel haya vuelto a la normalidad antes de tratar otra verruga (puede tardar hasta 6 semanas).

Si la verruga no desaparece por completo, el tratamiento puede repetirse hasta 3 veces. Repetir el programa de tratamiento completo después de un mínimo de 4 días hasta 1 semana de descanso. Ver «¿QUÉ ESPERAR?» para ayudarle a juzgar si su verruga ha desaparecido completamente.


Nota: Cuando se trata una verruga cubierta de callosidades, se aconseja remojar primero el pie en agua tibia durante 5 minutos y frotar el callo cuidadosamente con una lima antes del tratamiento.

Día 1 - Crio | Producto 1


PREPARARSE PARA EL TRATAMIENTO



1. Leer completamente las instrucciones de uso o ver el video. Retirar el adhesivo de seguridad.

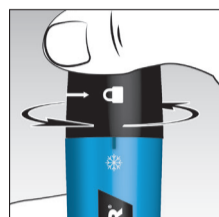

2. Abrir el producto 1. Girar 🔒 → 🔓.

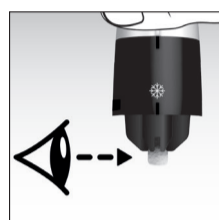

3. Revisar la espuma del interior.

NOTA: Si se utiliza por segunda vez, colocar la espuma nueva en el soporte de espuma negro. No reutilizar la espuma.

APLICAR EL TRATAMIENTO:


NOTA: Leer los pasos 4-8 antes de empezar. Usar un temporizador.



4. Estabilizar sobre la mesa durante todo el procedimiento.



5. Alinear los símbolos ❄️. No torcer ni presionar hacia abajo.

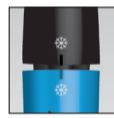

6. **PRESIONAR FIRMEMENTE 1 segundo.** A continuación, levante el soporte de espuma negro del contenedor de Crio azul.

NOTA: Si se carga durante demasiado tiempo, se puede derramar líquido frío inofensivo del dispositivo, es muy frío, pero no dañino. Lávese inmediatamente cuando esté en contacto con la piel sana.



7. **ESPERAR 20 segundos** para que se alcance la temperatura óptima, aparecerán escarchas y un condensado inofensivo.




8. **PRESIONAR LIGERAMENTE 20 segundos** sobre la verruga.

NOTA: 40 segundos en verrugas de pie con piel gruesa o callosa.




DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

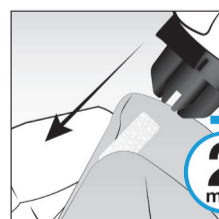

9. **Esperar 2 minutos** antes de usar un pañuelo de papel para quitar la espuma y desechar.

NOTA: Para tratar otra verruga repetir el paso 3.

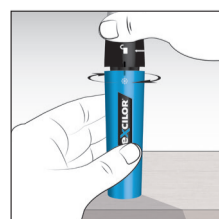


10. Dispositivo de recarga. Girar hasta 🔓 → 🔒 que se oiga un clic. **No presionar hacia abajo.**




Día 2, 3, 4, 5 - GEL | Producto 2

PREPARARSE PARA EL TRATAMIENTO:

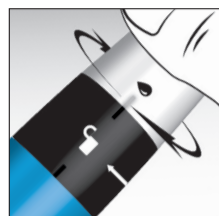

1. Abrir el producto 2. **Alinear** 💧 con 🔒 y tirar para abrir.

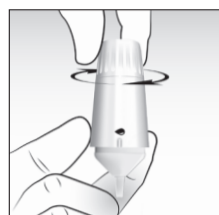


2. - **Mantener el aplicador en posición vertical.**
- Gire el dial hacia la derecha.
- Haga clic con una breve pausa para distribuir el gel desde la punta.
- Limpiar la punta y hacer un solo clic para obtener la dosis exacta.

NOTA: Cuando se usa por primera vez, puede necesitar varias vueltas completas (hasta 8) para acumular la presión suficiente y romper el sello hermético y liberar el gel en la punta.

APLICAR EL TRATAMIENTO:


NOTA: Leer los pasos 3-8 antes de proceder. Usar un temporizador.

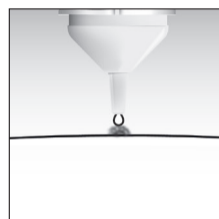

3. Aplicar **una gota (un clic) solamente** sobre la verruga. Si una gota no cubre toda la verruga, aplicar otra gota de gel.




Si el gel corrosivo entra accidentalmente en contacto con la piel sana, lavar toda la zona inmediatamente con agua y jabón para evitar irritaciones o quemaduras de la piel sana.

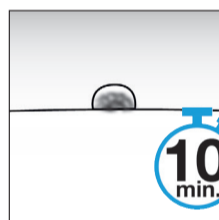


4. **Esperar 10-15 minutos** antes de ponerse calcetines, zapatos o guantes.



DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

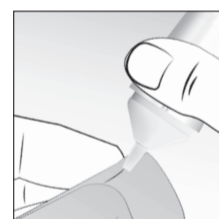

5. Limpiar la punta con un **pañuelo de papel.**

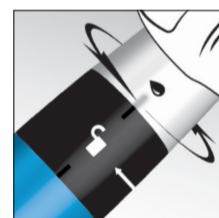

6. Dispositivo de recarga. Girar 🔒 → 🔓



7. Evitar la exposición al sol de 4 a 6 semanas.



8. Repetir el tratamiento **2 veces al día** durante **4 días.**

NOTA: En niños de 4 a 12 años, aplicar el gel **solamente 1 vez al día.**

FABRICANTE
Medical Brands
Innovations B.V.,
Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam,
the Netherlands.

DISTRIBUIDOR
Vemedica Pharma
C/Aragón 182
08011 Barcelona

Última revisión
Diciembre 2017

100CAVE.SPI.00

CE 0086