

excILOR®

TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 em 1

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Dispositivo



Saqueta com esponjas



Instruções de uso

O QUE NECESSITA



Lençóis de papel



Cronômetro

2 PRODUTOS / 1 DISPOSITIVO

Produto 1: CRIO

Suporte da esponja

Reservatório de Crioterapia

Apenas Dia 1

Produto 2: GEL APLICADOR

Aplicador de gel

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

Crianças: 1 vez por dia
Adultos: 2 vezes por dia

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.



Instruções vídeo

O QUE NECESSITA SABER ANTES DE UTILIZAR EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1

Não utilizar Excilor Tratamento anti- verrugas 2 em 1:

- Se a verruga estiver localizada numa zona que não seja nos pés ou mãos;
- Em pele a sangrar, irritada, inflamada ou que apresente algum sinal de inflamação, como comichão ou inchaço
- Em papilomas, sinais, manchas negras, sardas, verrugas de água (molluscus contagiosus), queratose seborreica (verruca seborreica) ou pele a descamar
- Se não tiver a certeza que se trata de uma verruga
- Se tem hipersensibilidade a algum dos ingredientes.

⚠ ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE USO

1. Exclusivamente para verrugas situadas nas mãos e nos pés.
2. Não engolir ou inalar o agente congelante, utilizar apenas em zonas bem ventiladas.
3. Utilizar apenas em combinação com a esponja que acompanha o produto.
4. Não exercer demasiada pressão quando se aplica a esponja na verruga.
5. Numa verruga normal, aplicar a esponja durante um máximo de 20 segundos. Numa verruga plantar durante um máximo de 40 segundos. (Ler a secção O QUE É UMA VERRUGA?)
6. Não ponha a esponja na área em redor da verruga.
7. As esponjas são para uma única utilização.
8. O agente congelante é inflamável e pode causar queimadura de gelo na pele sã.
9. Não coloque o reservatório de crioterapia perto do rosto, nem sobre partes do seu corpo ou roupa.
10. Manter longe de chama aberta, fontes de ignição, fontes de calor, luz solar direta e fontes electrostáticas ou elétricas. Não expor o dispositivo a temperaturas superiores a 50°C.
11. Não fume nem tenha cigarros acesos por perto.
12. Não perfurar nem queimar o reservatório de crioterapia, mesmo depois da sua utilização.
13. O gel de tratamento contém um ácido corrosivo.
14. Evitar o contacto com os olhos e as membranas mucosas. No caso do gel entrar em contacto accidental com os olhos ou as membranas mucosas, enxague com água abundante e procure assistência médica.
15. Evite o contacto com a pele sã que rodeia a verruga. Pode usar uma pomada como vaselina para proteger a zona circundante antes de aplicar o gel.
16. Se o gel entrar em contacto com a pele sã, **limpe a zona imediatamente com água e sabão para prevenir a irritação ou queimadura da pele sã.**
17. Se tiver dificuldades em aplicar o gel com precisão, por exemplo na planta do pé, peça ajuda.
18. Evitar o contacto do gel com a roupa, joias, tecidos ou móveis porque podem danificá-los.
19. Lave as mãos (exceto na zona tratada) imediatamente depois da utilização. Se tratou uma verruga nas mãos, espere 5 minutos.
20. Depois da utilização, pode haver pequenos resíduos de gel de tratamento no dispositivo, pelo que se recomenda precaução ao fechar e abrir de novo o dispositivo.
21. Não exponha a zona tratada à luz solar até que a pele tenha voltado à normalidade. Pode demorar 4 a 6 semanas. Pode ocorrer hiperpigmentação ou hipopigmentação da pele devido a exposição à luz solar.

22. Não toque nem esfregue a pele tratada, porque uma verruga é contagiosa. Não retire a crosta porque ela deve cair por si.

23. Para manter a higiene pessoal, o tratamento apenas deve ser utilizado por uma única pessoa.

24. Consulte o seu médico se:

- persistir a sensação de ardor;
- a verruga não tiver desaparecido depois de 3 ciclos de tratamento;
- notar irritação, vermelhidão ou dor.

QUE RESULTADOS ESPERAR?

Durante o tratamento, forma-se um calo (camada endurecida da pele) na zona da verruga tratada. Este calo vai-se desgastar de forma gradual. Uma borbulha, passível de não ser visível a olho nu, poderá aparecer debaixo da verruga. À medida que isto ocorre, a pele engrossada da verruga e o seu vírus causador irão desaparecer ou cair.

Para verificar se a verruga desapareceu, pode molhar a área tratada com água morna durante 5 minutos e esfregar o calo cuidadosamente com uma lima. Se a pele não apresentar pequenos pontos negros (pequenos vasos sanguíneos, típicos de uma verruga), significa que a verruga desapareceu.

O calo não é uma verruga. O calo pode existir durante algumas semanas antes de se ver o resultado ótimo. A pele renovada vai-se apresentar mais lisa, ligeiramente rosada e retomar a sua cor natural nas semanas seguintes.

O QUE É UMA VERRUGA?

As verrugas comuns (verruca vulgaris) e as verrugas plantares (verruca plantaris) aparecem na pele como pequenos tumores semelhantes a uma couve flor, causados por infecção pelo vírus do papiloma humano (VPH). As verrugas comuns apresentam-se principalmente nas mãos, nos dedos das mãos ou dos pés. As verrugas plantares crescem principalmente nas plantas dos pés ou nos calcanhares e tendem a ser mais planas, mais duras e frequentemente sensíveis/dolorosas quando se caminha ou se está de pé. Ambas são altamente contagiosas e três em cada quatro pessoas são afetadas durante a sua vida.

COMO FUNCIONA EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1?

Excilor® tratamento anti-verrugas 2 em 1 é um dispositivo médico para o tratamento eficaz e rápido das verrugas comuns e das verrugas plantares. Excilor® tratamento anti-verrugas 2 em 1 contém um produto com um agente de congelação, e um produto com um gel, baseado no princípio activo TCA-Active™, que combina a crioterapia e o tratamento com gel num único dispositivo. Ao atuar na verruga tanto congelando rapidamente o núcleo da verruga como descamando a pele infetada, combinam-se os dois tratamentos de verrugas mais utilizados para obter resultados mais rápidos. Tanto a pele engrossada da verruga como o seu vírus causador são eliminados e irá aparecer nova pele sã.

COMBINAÇÃO COM OUTROS TRATAMENTOS E/OU MEDICAMENTOS

Não usar com outros tratamentos anti-verrugas. Não se conhecem interações com medicamentos, se utilizado de acordo com as instruções.

QUEM PODE UTILIZAR EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1?

EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1 pode ser utilizado por adultos e crianças a partir dos 4 anos de idade. Os adultos devem aplicar o tratamento nas crianças.

As pessoas diabéticas, com má circulação, ou com doenças de pele e as mulheres grávidas ou a amamentar devem consultar o médico antes de utilizar este produto.

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS?

Quando se usa sobre a pele sã, podem aparecer picadas, sensação de ardor ligeiro ou de dor na zona tratada, o que pode causar dano na pele. No caso destes sintomas persistirem até à aplicação seguinte, deve interromper o tratamento.

- As complicações são pouco frequentes. É extremamente raro que se produza uma marca ou cicatriz permanente. Isso pode estar relacionado principalmente com uma anomalia, como transtornos de cicatrização ou uma infecção. Se tal suceder, consulte o seu médico.
- Como com todos os métodos de congelação, a pele pode ficar branca temporariamente.
- A aplicação do agente de congelação pode causar uma sensação de picada, comichão ou dor durante e após a congelação, que diminui rapidamente após a zona descongelar.
- A sobre exposição ao produto congelante pode danificar as camadas superiores da pele, produzindo cicatrizes e/ou levando a dano do nervo.

QUAIS SÃO OS INGREDIENTES?

Cryo-Active™, TCA-Active™ (baseado no ácido tricloroacético), Carbopol, Água.

CONSERVAÇÃO

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar na embalagem original a uma temperatura ambiente (15-25 °C) e proteger da luz solar.

Manter longe de chama aberta, fontes de ignição, fontes de calor, luz solar direta e fontes electrostáticas ou elétricas. Não expor o dispositivo a temperaturas superiores a 50°C.

Limpar cuidadosamente a ponta do aplicador de gel com um lenço de papel depois de cada utilização e bloquear o dispositivo.

Não utilizar depois da data de validade impressa no dispositivo e na caixa exterior. Depois da primeira abertura, o produto tem uma vida útil de 6 meses, não exceder a data de validade.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Um dispositivo que contém 2 produtos:
- um reservatório criogénico de 11,5 ml com suporte de esponja e esponja
- um aplicador de gel TCA-Active™ de 1 ml
- Saqueta com 5 esponjas de aplicação
- Instruções de utilização

COMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1?

Ver parte posterior das instruções de utilização

COMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1?

Dia 1: Aplicar a crioterapia ❄️. Adultos e crianças: **uma única vez.**

Dia 2, 3, 4, 5: Aplicar o gel de tratamento 💧. Adultos: 2 vezes por dia; crianças de 4 a 12 anos: 1 vez por dia.

Quando se usa pela primeira vez, tratar apenas uma verruga antes de tratar as verrugas múltiplas, para experimentar o efeito sobre a sua pele. Começar a tratar outra verruga apenas se não teve qualquer efeito secundário (normalmente dentro de 5 dias). Se tiver verrugas múltiplas perto umas das outras (dentro de 1 cm), esperar até que a pele tenha regressado à normalidade antes de tratar outra verruga (pode demorar até 6 semanas).

Se a verruga não desaparecer por completo, o tratamento pode repetir-se até 3 vezes. Repetir o programa de tratamento completo depois de um mínimo de 4 dias até 1 semana de descanso. Ver O QUE ESPERAR? para ajudar a avaliar se a sua verruga desapareceu completamente.

Nota: Quando se trata uma verruga coberta de calosidades, aconselha-se molhar primeiro o pé em água morna durante 5 minutos e esfregar o calo cuidadosamente com uma lima antes do tratamento.

Dia 1 - Crioterapia | Produto 1

PREPARAR-SE PARA O TRATAMENTO:




1. Ler completamente as instruções de utilização ou ver o vídeo. Retirar o autocolante de segurança



vídeo de instruções



2. Abrir o produto 1. Rodar 🔒 → 🔓.

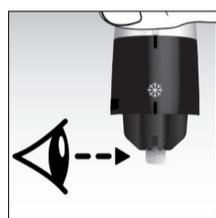

3. Verificar a esponja no interior

NOTA: Se utilizar pela segunda vez, colocar a esponja nova no suporte preto da esponja. Não reutilizar a esponja.

APLICAR O TRATAMENTO:

NOTA: Ler os passos 4-8 antes de iniciar! Usar um Cronómetro.



4. Estabilizar sobre a mesa durante todo o procedimento.



5. Alinhar os símbolos ❄️. Não rodar nem pressionar para baixo.



6. **PRESSIONAR FIRMEMENTE durante 1 segundo.** Depois, levante o suporte preto da esponja do reservatório azul de crioterapia.

NOTA: Se carregar durante demasiado tempo, o dispositivo pode verter um líquido frio inofensivo. Este é muito frio, mas inofensivo. Lavar imediatamente se entrar em contacto com pele sã.



7. **ESPERAR 20 segundos** até que se alcance a temperatura ótima. Vão aparecer gelo e um condensado inofensivos.




8. **PRESSIONAR LIGEIRAMENTE 20 segundos** sobre a verruga.

NOTA: 40 segundos nas verrugas dos pés com pele grossa ou com calosidades.



DEPOIS DO TRATAMENTO:

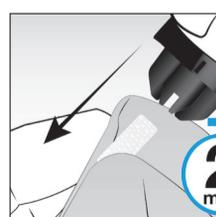

9. Esperar 2 minutos antes de usar um lenço de papel para retirar a esponja e deitar fora.

NOTA: Para tratar outra verruga repetir o passo 3.




10. Volte a bloquear o dispositivo. Rodar até 🔓 → 🔒 se ouvir um clic. Não pressionar para baixo.




Dia 2, 3, 4, 5 - GEL | Produto 2

PREPARAR-SE PARA O TRATAMENTO:

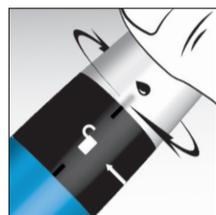

1. Abrir o produto 2. Alinhar 💧 com 🔒 e puxar para abrir.

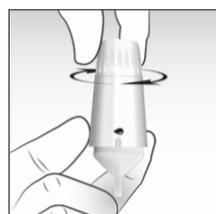


2. - Manter o aplicador em posição vertical.
- Rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- Fazer um clic com uma breve pausa para distribuir o gel até à ponta.
- Limpar a ponta e fazer um único clic para obter a dose exata.

NOTA: Quando utilizar pela primeira vez, pode necessitar de várias voltas completas (até 8) para acumular pressão suficiente para romper o selo e libertar o gel na ponta.

APLICAR O TRATAMENTO:


NOTA: Ler os passos 3-8 antes de proceder. Usar um Cronómetro.

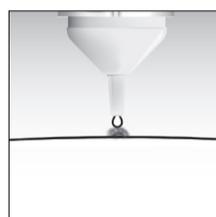

3. Aplicar apenas uma gota (um clic) sobre a verruga. Se uma gota não cobrir toda a verruga, aplicar outra gota de gel.




Se o gel corrosivo entrar acidentalmente em contacto com a pele sã, lavar toda a zona imediatamente com água e sabão para evitar irritações ou queimaduras da pele sã.

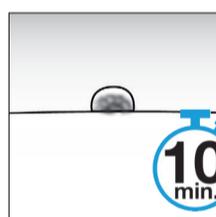


4. Esperar 10-15 minutos antes de calçar meias, sapatos ou luvas.



DEPOIS DO TRATAMENTO:

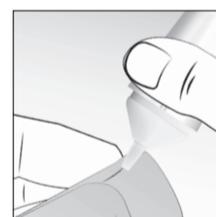

5. Limpar a ponta com um lenço de papel.

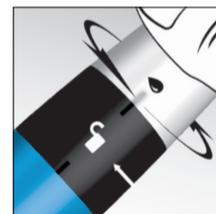

6. Volte a bloquear o dispositivo. Rodar 🔓 → 🔒



7. Evitar a exposição ao sol durante 4 a 6 semanas.



8. Repetir o tratamento 2 vezes por dia durante 4 dias.

NOTA: Em crianças de 4 a 12 anos, aplicar o gel apenas 1 vez por dia.

FABRICANTE
Medical Brands
Innovations B.V.,
Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam,
the Netherlands.

DISTRIBUIDOR
Vemedica Pharma Portugal S.A.
Av. D. João II, nº50
4º piso - 1990-095 Lisboa

REF 100CA.VE.xx

ÚLTIMA REVISÃO
DEZEMBRO 2017

100CAVE.PT.I.00

CE 0086